

### Dados técnicos

**Tamanho normal**, desde 165cm de estatura, dobrado dentro da mala  
Comprimento x largura x altura: 87 x 30 x 25  
Montado: 96 x 59,5 x altura variável, dependente do ajuste

**Júnior**, até 165cm de estatura, dobrado dentro da mala: 7cm mais curto  
Montado: 7cm mais curto e 7cm mais estreito

**Shopper**, versão reduzida\*, por causa de rodas mais pequenas, dimensões reduzidas.  
A versão júnior também serve perfeitamente para crianças e pessoas de baixa estatura.

**Peso:** 16Kg / sem bateria e assento: 11Kg  
\*Shopper 12Kg / 8Kg

**3 Baterias de escolha**, watt-hora (wh), peso, alcance em piso plano com 100Kg de carga:  
158 wh\* 1,2kg 13km  
274,4wh\* 1,85 kg 25km  
420wh\*\* 2,65kg 35km

\*permitido para passagens aéreas \*\*interdito em viagens aéreas

\* Approved for air travel \*\* Not approved for air travel

**Carregador:** 100 – 240v regulação contínua, tempo de carregamento de bateria vazia: 5 / 8 / 12 h

**Capacidade de carga máxima:** 150kg excluindo bagagem  
Mais carga possível por consulta

**Motor:** potência nominal 24V 200watts, dentro do cubo da roda, marcha frente/atrás. \*Shopper: 100watts

**Desempenho de subida com 100kg de carga:** 15% \*Shopper 6%


**Velocidade:** 6km/h\*\* \*Shoper 4km/h

\*\*Na União Europeia a velocidade máxima de 6km/h não pode ser excedida em espaço público. Para velocidades mais altas pedimos o favor de nos contactar.

**Pneus:** frente: 200 x 50 mm, traseiros 186 x 70 mm,  
\*Shopper todos os pneus 150 x 30 mm de espuma dura

**Travões:** Ambos os pneus traseiros com travão de mão incluindo travão de o. \*Shopper 1 travão à direita  
Peças incluídas salvo acordo em contrário:

**1 TravelScoot completo** com bateria à escolha, carregador, mala scooter, mala trapézio de fixação por velcro para carga leve e ferramentas de bordo.  
Transporte de bengala e cesta está preparado de serie.

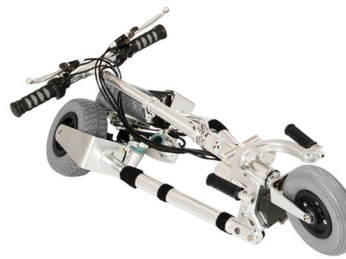

**TravelScoot**  
Re-Mobilize Your Life!

O TravelScoot com os seus 16Kg é, de longe, o veículo elétrico mais leve e compacto do mundo. Perfeito para todos os indivíduos que têm problemas de locomoção.

O sistema inovador de portinhola do **TravelScoot** permite pela primeira vez, que um veículo destes é dobrável para o mesmo tamanho de um scooter de duas rodas. O TravelScoot dobrado, cabe completamente dentro da respetiva mala que encontra lugar onde antes em nenhum veículo elétrico cabia.

A imagem perspicaz do **TravelScoot** remove o estigmatismo de ser imóvel existente em algumas pessoas. Se outras pessoas registarem o veículo, geralmente respondem com um sorriso afirmativo, um “dedo polegar para cima” ou com um “que veículo espetacular!”.

Muitos mais detalhes encontram-se na nossa página online.

[www.travelscoot.com](http://www.travelscoot.com)

or visit us:

[escooter.de](http://escooter.de) TravelScoot sales Europe

Adi-Maislinger-Str. 7 D-81373 Munich

Open Mo-Fr 10 a.m. to 6.30 p.m.





## Descrição de produto:

De uma ideia revolucionária, com a utilização de alumínio de avião, surgiu uma estrutura patenteada muito leve e robusta. Apesar da carga máxima de 150Kg, não existem poucos utilizadores de alto peso usando o TravelScoot aceitando a única desvantagem de menos desempenho de subida e alcance reduzido. O alcance pode ser aumentado acrescentando uma segunda bateria em paralelo.

Por causa do peso imbatível e do tamanho de bagagem, o **TravelScoot** está predestinado a ser levado para todas as localidades. Para o supermercado perto de casa, para as compras com transportes públicos na cidade, para diversos eventos ou numa viagem pelo meio do mundo ou em todo o mundo através de avião ou cruzeiro.

O **TravelScoot** torne-lhe móvel de novo, mesmo se as suas pernas não lhe permitem ir às compras, ele traz-lhe o prazer e a alegria de volta.

Se andar a pé já é difícil, estar em pé geralmente não é mais agradável. Mas estar em pé numa fila infelizmente é uma necessidade diária. Seja na caixa, o num balcão, etc.. Com o **TravelScoot** já não é necessário estar em pé numa fila. Está-se sentado numa fila. Em transportes públicos você sempre tem a sua cadeira consigo e é desnecessário pedir a alguém para se levantar. Simplesmente onde houver lugar, parar diagonalmente na direcção de condução e ficar sentado com o travão ativado.

O uso de meios de transporte para deficientes (com mais de duas rodas), sempre é permitido onde você se pode deslocar em pé. Portanto também dentro de edifícios!

Com uma considerável poupança de peso em relação de produtos da concorrência, um alcance estendido é óbvio.

No dia a dia um Scooter tem de ser levantado várias vezes. Sendo mesmo somente para um passeio ou um carro. Em caso pior com falta de um ascensor, até por escadas! Aqui cada quilo é crucial!



## Para o seu TravelScoot, temos uma extensa gama de acessórios disponíveis.

O reboque universal pode ser usado em qualquer dos casos.



Para bagagem leve



Kit viagem cruzeiro



Placa de pés



Kit viagem aérea



Cesto de compras



porte de bateria mais alto



3x diferentes tipos de baterias lithium disponíveis



Suspensão de assento