



Travel Scoot® Hook-On

Istruzioni per il montaggio iniziale



1. Applicare entrambe le strisce adesive in velcro sulla parte verticale (gambe, sotto la piega) del castello del sedile con le estremità tagliate rivolte verso l'interno.

2. Segnare il centro di tutte le batterie con un nastro adesivo stretto o un pennarello.



3. Rimuovere il sedile dal bullone a U e girarlo. Far scorrere prima il manicotto distanziatore da 3 cm sul tubo sella, quindi far scorrere il manicotto distanziatore da 3 cm sul tubo sella.


Agganciare la piastra con i ganci piatti verso il sedile e infine il manicotto di 2 cm. Fissare i manicotti e la piastra con della colla o del nastro adesivo in modo che non possano cadere a terra durante la rimozione del sedile.

4.) I nostri cestini pieghevoli sono dotati di una chiusura sul bordo superiore per il fissaggio quando sono piegati. Questa chiusura interferisce con l'accessorio Hook-on, pertanto si prega di installare il cestino con la chiusura rivolta verso il gancio o di rimuovere completamente la chiusura.



Hook-on istruzioni per il montaggio di due cestini pieghevoli e una batteria supplementare

1.) Posizionare la prima batteria nella sua staffa con il codino del cavo verso l'alto a sinistra. Posizionare le due staffe ad H sulla batteria all'interno delle due marcature. I ganci più lunghi devono essere rivolti in avanti.

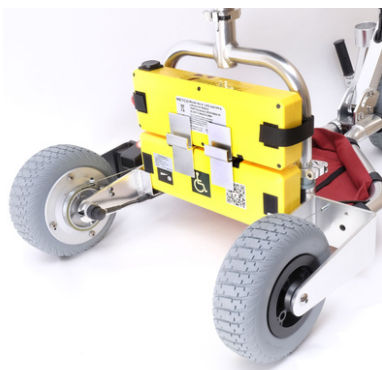

2.) Inserire la seconda batteria e allinearla alla prima, con il codino del filo verso la parte inferiore sinistra. In questo modo le batterie non devono scambiarsi di posizione per collegarsi allo scooter. Fissare la batteria superiore alla forcella con le strisce di velcro.

3.) Aprire i cestini pieghevoli e premere le superfici inferiori. La sezione divisa (vedi freccia) è la superficie di appoggio per i ganci piatti inferiori.



4.) Installare il sedile nel giogo. Installare il primo cestello agganciando contemporaneamente i ganci piatti superiori e inferiori. Ripetere l'operazione con il secondo cestello.